



STERRAD VELOCITY™

BIOLOGISCHES INDIKATORSYSTEM



GEWISSHEIT IN 15* MINUTEN



INTELLIGENTE BIOINDIKATOR (BI)-TECHNOLOGIE, IN DIE ALLE NEUEN FUNKTIONEN VON STERRAD™ SYSTEM-STERILISATOREN KOMPLETT INTEGRIERT SIND.

*15 oder 30min bis zum Ergebnis, abhängig von der Softwareversion auf dem STERRAD VELOCITY™ Reader.
15 Minuten bis zum Ergebnis für SW-Version 1139260410 oder höher, 30 Minuten bis zum Ergebnis für SW-Version 1139260317 oder niedriger.
Die Implementierung des Software-Upgrades in EMEA wird in Phasen erfolgen. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter, um mehr zu erfahren.

Zusätzliche Sicherheit Nach Zyklusabschluss

Die Schnelligkeit des STERRAD VELOCITYTM Biologischen Indikator (BI)-Systems erfüllt die Anforderungen innerhalb eines Instrumentenkreislaufs, denn die Ergebnisse liegen innerhalb von 15 Minuten vor.

Die Verbindung mit STERRADTM Systemen, Chargendokumentationssystemen (CDS) und Krankenhaus-Netzwerken über ASP ACCESSTM kann die Konformität verbessern.*

STERRAD VELOCITYTM ist die ideale Ergänzung für die hohen Anforderungen in der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA/AEMP).

→ SCHNELLIGKEIT, PRODUKTIVITÄT UND EIN GUTES GEWISSEN

- Dank der Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten können Gesundheitseinrichtungen neben der Bestätigung der korrekten Zyklusparameter für die Chargenfreigabe auch die Information zur mikrobiologischen Wirksamkeit im Routinebetrieb erhalten
- Von ASP für einen optimalen Betrieb mit allen STERRADTM System-Sterilisatoren entworfen und zugelassen
- Dank des intuitiven Touchscreens ist das STERRAD VELOCITYTM Lesegerät einfach zu bedienen





Schneller Durchsatz Des Gerätes

→ ERGEBNISSE IN 15 MINUTEN, DIE EINE
VERBESSERTE KONFORMITÄT ERMÖGLICHEN

STERRAD VELOCITY™ ermöglicht Ihnen:

- Schnelle Aussagen zur mikrobiologischen Wirksamkeit mit Gewissheit in nur 15 Minuten

Funktionen des STERRAD VELOCITY™ Biologischen Indikatorsystems:


- Automatische Verwaltung der Aufzeichnungen zur Gewährleistung einheitlicher und vollständiger BI-Aufzeichnungen
- Selbstdiagnose-Technologie zur Sicherstellung einer maximalen Betriebszeit



STERRAD VELOCITY™
BIOLOGISCHES INDIKATORSYSTEM



Das Intelligente Bioindikator (BI)-System

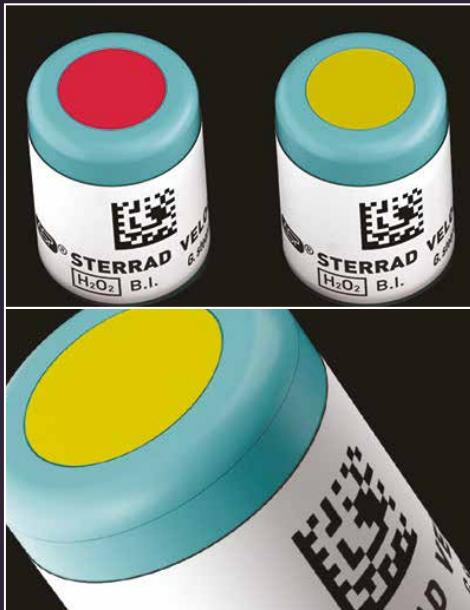

INTEGRIERTER CHEMISCHER INDIKATOR SORGT FÜR EINE SCHNELLE IDENTIFIZIERUNG VON VERARBEITETEN IM VERGLEICH ZU UNVERARBEITETEN BIS





ELEKTRONISCHE SPEICHERUNG DER SERIENNUMMER, CHARGENUMMER UND DES VERFALLSDATUMS ANHAND DER BARCODE-DATEN AUF DEM BI



AKTIVIERUNG DES BI DURCH EINFACHES HERUNTERDRÜCKEN DER KAPPE

Sporenplättchen enthält *Geobacillus stearothermophilus*

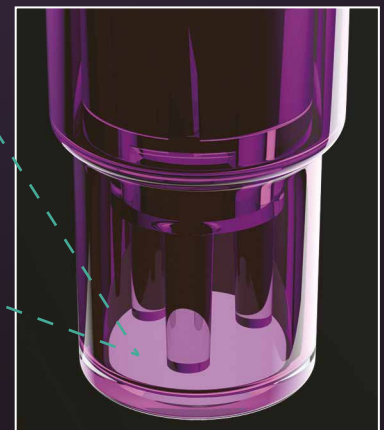

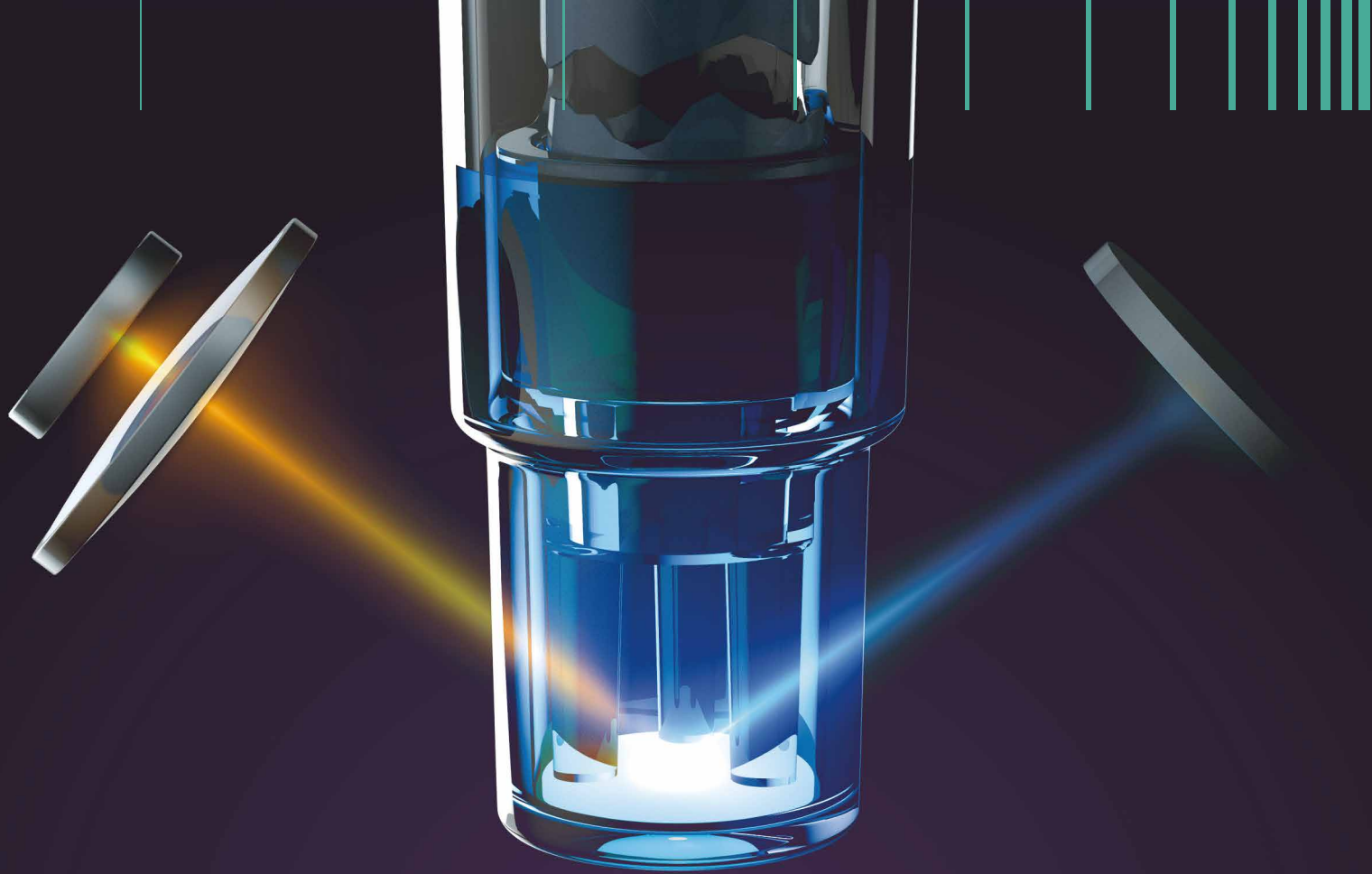

Ablesen Mit Gewissheit



UNTER ANWENDUNG MODERNER OPTISCHER MESSTECHNIK

- Einsatz fluoreszenz-optischer Technik zum Nachweis biologischer Aktivität
- Eliminierung der Subjektivität bei der visuellen Interpretation der Ergebnisse

ASPTM

STERRAD VELOCITYTM
BIOLOGISCHES INDIKATORSYSTEM




Verbunden und Geschützt

→ ÜBER DIE ASP ACCESS™ TECHNOLOGIE WERDEN DIE BI-ERGEBNISSE UND DIE ZYKLUSAUFZEICHNUNGEN DER STERRAD™ SYSTEME AUTOMATISCH ABGEGLICHEN.


- Daten können für eine verbesserte Konformität gespeichert und weitergeleitet werden*
- Kommuniziert mit Chargen-Dokumentationssystemen (CDS) und Krankenhaus-Netzwerken
- Senkt den Bedarf an manueller Verwaltung von Aufzeichnungen
- Positive BIs können zum jeweiligen STERRAD™ Sterilisator und den aufbereiteten Instrumenten zurückverfolgt werden



* Das STERRAD VELOCITY™ Biologische Indikatorsystem verfügt über Funktionen, die zur Verbesserung der Konformität beitragen können, darunter BI-Erinnerungen gemäß den Krankenhausrichtlinien sowie eine verbesserte Handhabung und Aufbewahrung der Aufzeichnungen.

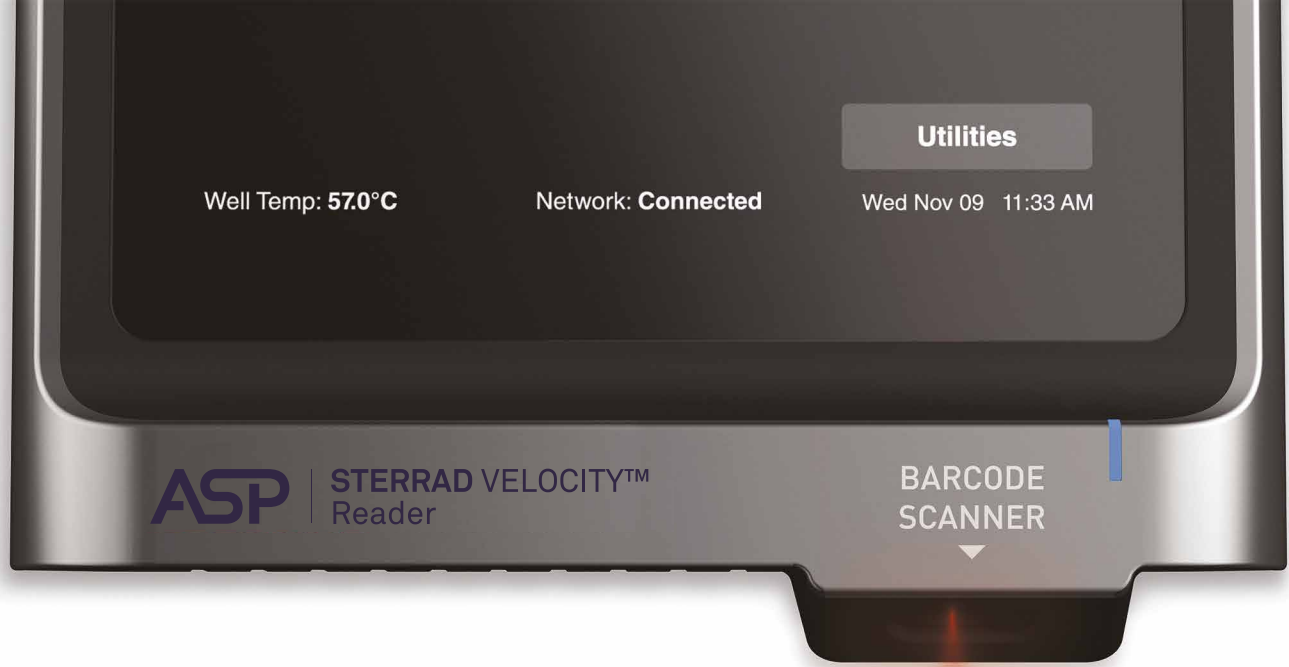

Für Eine Einfache Bedienung Ausgelegt

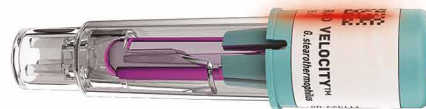

ERGONOMISCHES, INTUITIVES DESIGN ZUR MAXIMIERUNG DER PRODUKTIVITÄT

- Schrittweise Bildschirmanweisungen für einen korrekten Betrieb bei gleichzeitiger Reduzierung der Benutzerfehlerrate
- Einfache, gut ablesbare Countdown-Zähler für jede einzelne Mulde und auffällige Anzeigen von BI-Ergebnissen
- Integrierter Scanner und Touchscreen-Oberfläche sorgen für die nahtlose Eingabe von BI-, Sterilisator- und Beladungsdaten*
- Akustische und optische Warnungen signalisieren dem Anwender sofort, wenn ein positiver BI vorliegt

ASPTM

STERRAD VELOCITY™
BIOLOGISCHES INDIKATORSYSTEM

* Für die automatische Datenintegration muss eine Verbindung zur ASP ACCESS™ Technologie bestehen.

STERRAD VELOCITY™

BIOLOGISCHES INDIKATORSYSTEM




GEWISSHEIT IN 15* MINUTEN



asp.com

ASP Advanced Sterilization Products

ASP Deutschland GmbH
Uhlandstrasse 49, 78554 Aldingen
©ASP 2021. Alle Rechte vorbehalten.

 ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC.
33 Technology Drive, Irvine CA 92618, USA

 ASP, The Netherlands BV
BIC 1, 5657 BX Eindhoven, The Netherlands



Bitte lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung (IFU) vor der Anwendung, um wichtige Informationen zu erhalten, einschließlich Kontraindikationen, Warnhinweise und korrekte Anweisungen.

Capitalized product names are trademarks of ASP Global Manufacturing, GmbH.

AD-170021-03-CT_C-MDR